

Company Profile

品牌故事

施罗得医疗科技发展有限公司，是一家专注于口腔种植产品研发、生产与销售的三类医疗器械企业。

公司以口腔种植体及相关产品为主营业务，其创立初衷旨在致敬种植先驱施罗德教授，凝聚了对口腔种植事业的深厚敬意与追求。

公司拥有一支由专业运营种植项目十年以上经验的精英团队组成，他们凭借丰富的行业经验、精湛的专业技术和敏锐的市场洞察力，为公司的发展奠定了坚实基础。

施罗得始终秉持着专业、创新、卓越的理念，致力于成为行业内最专业、为口腔种植事业持续赋能的领军企业。公司不断投入研发资源，提升产品质量和性能，以满足客户日益增长的需求，为推动口腔种植领域的发展贡献力量。

未来，施罗得将继续砥砺前行，以更优质的产品和服务，为口腔健康事业创造更多价值，成为广大患者和医疗从业者信赖的伙伴。

研发

生产

销售

产品介绍

颈部皮质骨缓冲设计
诱导骨再生螺纹槽

高纯净 SLA 表面处理
2000 级以上纳米
多维度孔隙结构

渐变螺纹设计
可压缩骨并逐渐加宽牙槽窝
从而提高初期稳定性

内锥外柱大螺纹
稳定性设计
极差切割挤压松质骨

超强冷作四级钛
1000MPa 抗拉伸抗压强
更好生物相容性

自切割刃
骨屑收集移植到
种植体上方

S 系列说明


亲水种植体系列 - 碧山

内六角加厚防止基台折裂，减少临床后期机械性并发症



亲水种植体系列 - 春辰

实现种植后期修复无忧选择

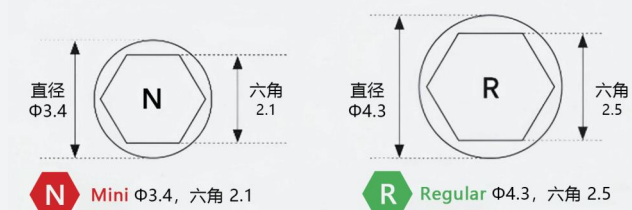

M 施罗得用“N”表示；



国际原料采用 - 纯钛 / 高级冷作四级钛

植体原料四级冷轧纯钛强度可达 872Mpa，高级别可达到 900Mpa，是目前市面上已知强度韧性最高的四级冷轧纯钛之一；



普通纯钛 (TA4) 强度 750Mpa

高级冷作钛 (TA4G) 抗屈 > 800Mpa，抗拉 > 900Mpa

钛合金 (Ti-6Al-4V-ELI) 强度 1000Mpa



SLA 表面处理技术

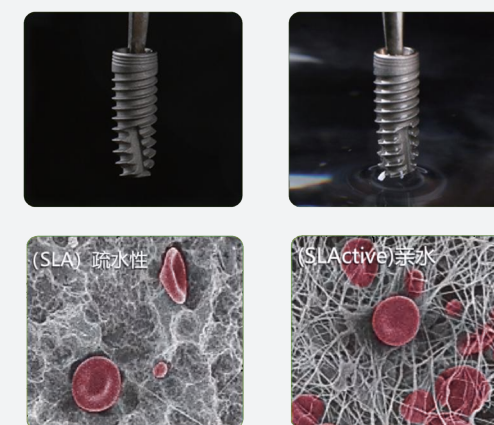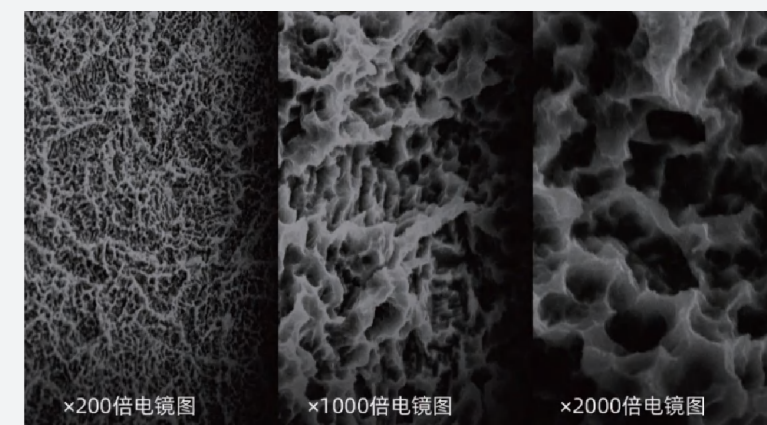

可从根本上改善骨结合过程，在获得便于骨细胞附着的最佳表面形貌的同时提高种植体表面亲水性和化学活性，可快速附着血液与成骨因子，使接触成骨能力大幅提升，促进新骨迅速形成，大大缩短种植体周围的骨结合时间，显著提高种植体生物学稳定性和种植成功率。

因此，活性亲水表面对骨质不良患者更具优势。



种植工具箱

A graphic featuring a globe with a blue and white striped pattern. Overlaid on the globe is the text "Schroedinger" in a stylized green font. Above it is "Zn" and below it is "Mg". To the right of the globe is a complex 3D molecular structure with black and white spheres. Below the globe is a small, clear, spherical object.

The diagram illustrates the toolhead assembly and the storage of various tools in the tool magazine. The tools are organized as follows:

- Top Row:** 环切刀 $\Phi 4.1$ (Ring Cut Tool $\Phi 4.1$), 球钻 $\Phi 3.1$ (Ball Drill $\Phi 3.1$), 定位钻 $\Phi 2.0$ (Positioning Drill $\Phi 2.0$), 先锋钻 $\Phi 2.0$ (Pioneer Drill $\Phi 2.0$), 侧向钻 $\Phi 2.0$ (Side Drill $\Phi 2.0$).
- Second Row:** 扩孔钻 $\Phi 2.2/2.7$ (Reamer $\Phi 2.2/2.7$), $\Phi 3.4$ 08-12, $\Phi 3.8$ 07-12, $\Phi 4.3$ 07-12, $\Phi 5.0$ 07-12.
- Third Row:** $\Phi 3.4$ 08-18, $\Phi 3.8$ 07-18, $\Phi 4.3$ 07-18, $\Phi 5.0$ 10.
- Fourth Row:** $\Phi 4.0$, 平行杆 $\Phi 4.0$, $\Phi 4.5$, 平行杆 $\Phi 4.5$.
- Fifth Row:** L18 机用梅花扳手 L28, 加长杆, N 持钉器, R.
- Sixth Row:** L18 手用梅花扳手 L28, N 手持钉器, R.

Additional tools shown include:


- 平行杆 (Parallel Rod)
- 机用梅花扳手 (Machine Wrench)
- 手持梅花扳手 (Hand Wrench)
- 加长杆 (Extension Rod)
- 持钉器 (Nail Holder)
- 手持持钉器 (Handheld Nail Holder)
- 停止环8 (Stop Ring 8)
- 停止环10 (Stop Ring 10)

(注: 用钻余长1mm) (Note: Use drill with 1mm remaining length)

常规种植解决方案


适用于由常规扩孔钻完成的长度7-18 mm施罗得种植体下种植。

示例 - 使用常规扩孔钻备洞植入Ø4.3X12mm 施罗得种植体为例

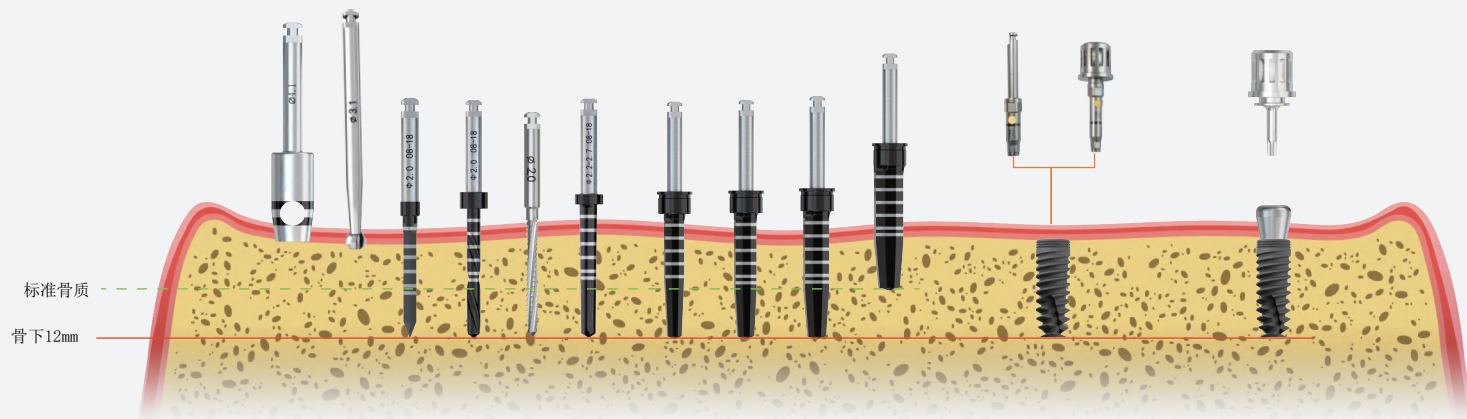


病例展示


亲水种植体即刻种植案例

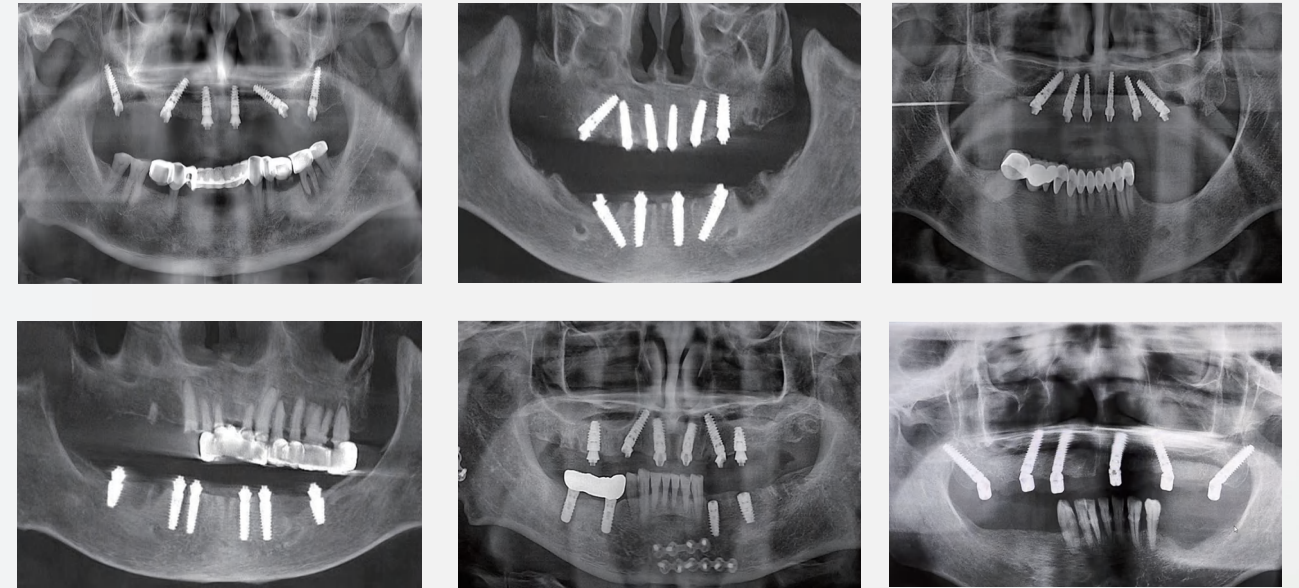

亲水表面种植体对于炎症的调节和骨质条件不良的临床情况，有较为有利的研究结果。其中，关于不同种植体表面化学特性影响巨噬细胞释放抗炎细胞因子的体外研究表明，亲水表面种植体降低了人类巨噬细胞促炎因子的表达。通过调整促炎因子的表达这种重要的生物机制来促进和改善愈合。

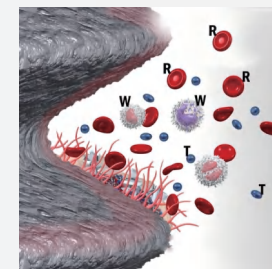

(早期骨结合 3-4 周)

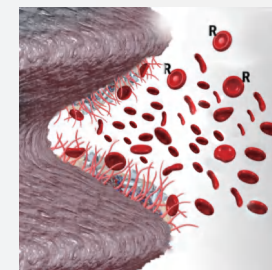


(骨结合 5-6 周)

吸烟患者
骨质疏松患者
糖尿病患者
缺钙患者
失眠患者
服用双膦酸药物
放化疗结束后的患者
代谢性疾病的患者




种植体


圆柱型牙种植体	编码	规格(ØD×L)
φ 3.4	CAA.00131	φ 3.4×8mm
	CAA.00132	φ 3.4×10mm
	CAA.00133	φ 3.4×12mm
	CAA.00134	φ 3.4×14mm
	CAA.00135	φ 3.4×16mm
	CAA.00136	φ 3.4×18mm

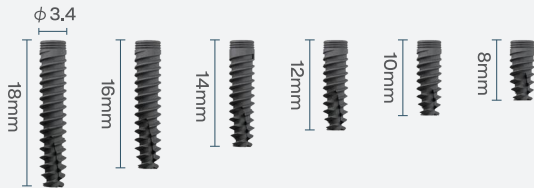

圆柱型牙种植体	编码	规格(ØD×L)
φ 3.8	CAA.00137	φ 3.8×7mm
	CAA.00138	φ 3.8×8mm
	CAA.00139	φ 3.8×10mm
	CAA.00140	φ 3.8×12mm
	CAA.00141	φ 3.8×14mm
	CAA.00142	φ 3.8×16mm
	CAA.00143	φ 3.8×18mm

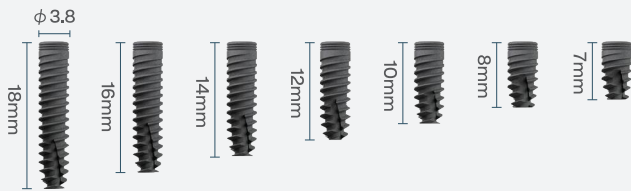

圆柱型牙种植体	编码	规格(ØD×L)
φ 4.3	CAA.00144	φ 4.3×7mm
	CAA.00145	φ 4.3×8mm
	CAA.00146	φ 4.3×10mm
	CAA.00147	φ 4.3×12mm
	CAA.00148	φ 4.3×14mm
	CAA.00149	φ 4.3×16mm
	CAA.00150	φ 4.3×18mm

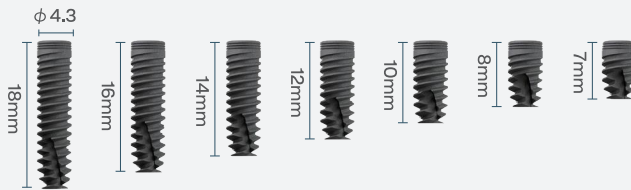

圆柱型牙种植体	编码	规格(ØD×L)
φ 5.0	CAA.00151	φ 5.0×7mm
	CAA.00152	φ 5.0×8mm
	CAA.00153	φ 5.0×10mm
	CAA.00154	φ 5.0×12mm
	CAA.00155	φ 5.0×14mm



圆柱型牙种植体	编码	规格(ØD×L)
φ 5.5	CAA.00156	φ 5.5×7mm
	CAA.00157	φ 5.5×8mm
	CAA.00158	φ 5.5×10mm
	CAA.00159	φ 5.5×12mm



基台


窄径愈合基台	编码	规格(ØD×L×L0)
	CAB.00243	φ 4.0×1.5×1.5mm
	CAB.00244	φ 4.0×3.0×1.5mm
	CAB.00245	φ 4.0×4.5×1.5mm
	CAB.00246	φ 4.0×1.5×3.0mm
	CAB.00247	φ 4.0×3.0×3.0mm
	CAB.00248	φ 4.0×4.5×3.0mm
	CAB.00249	φ 4.5×1.5×1.5mm
	CAB.00250	φ 4.5×3.0×1.5mm
	CAB.00251	φ 4.5×4.5×1.5mm
	CAB.00252	φ 4.5×1.5×3.0mm
	CAB.00253	φ 4.5×3.0×3.0mm
	CAB.00254	φ 4.5×4.5×3.0mm



标准径愈合基台	编码	规格(ØD×L×L0)
	CAB.00255	φ 4.5×1.5×1.5mm
	CAB.00256	φ 4.5×3.0×1.5mm
	CAB.00257	φ 4.5×4.5×1.5mm
	CAB.00258	φ 4.5×1.5×3.0mm
	CAB.00259	φ 4.5×3.0×3.0mm
	CAB.00260	φ 4.5×4.5×3.0mm
	CAB.00261	φ 5.5×1.5×1.5mm
	CAB.00262	φ 5.5×3.0×1.5mm
	CAB.00263	φ 5.5×4.5×1.5mm
	CAB.00264	φ 5.5×1.5×3.0mm
	CAB.00265	φ 5.5×3.0×3.0mm
	CAB.00266	φ 5.5×4.5×3.0mm



窄径角度基台	编码	规格(ØD×L×A)
	CAB.00283	φ 4.0×1.5×15°×8×A
	CAB.00284	φ 4.0×3.0×15°×8×A
	CAB.00285	φ 4.0×4.5×15°×8×A
	CAB.00286	φ 4.5×1.5×15°×8×A
	CAB.00287	φ 4.5×3.0×15°×8×A
	CAB.00288	φ 4.5×4.5×15°×8×A

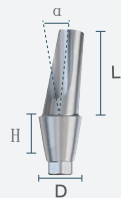

标准径角度基台	编码	规格(ØD×L×A)
	CAB.00289	φ 4.5×1.5×15°×8×A
	CAB.00290	φ 4.5×3.0×15°×8×A
	CAB.00291	φ 4.5×4.5×15°×8×A
	CAB.00292	φ 5.5×1.5×15°×8×A
	CAB.00293	φ 5.5×3.0×15°×8×A
	CAB.00294	φ 5.5×4.5×15°×8×A



窄径直基台

编码 规格($\varnothing D \times L$)

CAB.00295	$\varnothing 4.0 \times 1.5 \times 6.0\text{mm}$
CAB.00297	$\varnothing 4.0 \times 3.0 \times 6.0\text{mm}$
CAB.00298	$\varnothing 4.0 \times 4.5 \times 6.0\text{mm}$
CAB.00299	$\varnothing 4.5 \times 1.5 \times 6.0\text{mm}$
CAB.00300	$\varnothing 4.5 \times 3.0 \times 6.0\text{mm}$
CAB.00301	$\varnothing 4.5 \times 4.5 \times 6.0\text{mm}$



标准径直基台

编码 规格($\varnothing D \times L$)

CAB.00302	$\varnothing 4.5 \times 1.5 \times 6.0\text{mm}$
CAB.00304	$\varnothing 4.5 \times 3.0 \times 6.0\text{mm}$
CAB.00305	$\varnothing 4.5 \times 4.5 \times 6.0\text{mm}$
CAB.00306	$\varnothing 5.5 \times 1.5 \times 6.0\text{mm}$
CAB.00307	$\varnothing 5.5 \times 3.0 \times 6.0\text{mm}$
CAB.00308	$\varnothing 5.5 \times 4.5 \times 6.0\text{mm}$



窄径多功能基台

编码 规格($\varnothing D \times L$)

CAB.00309	$\varnothing 5.0 \times 8.7\text{mm}$	穿龈高度1.5mm
CAB.00310	$\varnothing 5.0 \times 10.2\text{mm}$	穿龈高度3.0mm
CAB.00311	$\varnothing 5.0 \times 11.7\text{mm}$	穿龈高度4.5mm



标准径多功能基台

编码 规格($\varnothing D \times L$)

CAB.00312	$\varnothing 5.0 \times 8.9\text{mm}$	穿龈高度1.5mm
CAB.00313	$\varnothing 5.0 \times 10.4\text{mm}$	穿龈高度3.0mm
CAB.00314	$\varnothing 5.0 \times 11.9\text{mm}$	穿龈高度4.5mm



窄径多功能基台

编码 规格($\varnothing D \times L$)


CAB.00315	$\varnothing 5.0 \times 8.9\text{mm}$	穿龈高度2mm 角度17°
CAB.00316	$\varnothing 5.0 \times 9.4\text{mm}$	穿龈高度3mm 角度30°
CAB.00317	$\varnothing 5.0 \times 9.9\text{mm}$	穿龈高度3mm 角度17°
CAB.00318	$\varnothing 5.0 \times 10.4\text{mm}$	穿龈高度4mm 角度30°



标准径多功能基台

编码 规格($\varnothing D \times L$)

CAB.00319	$\varnothing 5.0 \times 8.9\text{mm}$	穿龈高度2mm 角度17°
CAB.00320	$\varnothing 5.0 \times 9.4\text{mm}$	穿龈高度3mm 角度30°
CAB.00321	$\varnothing 5.0 \times 9.9\text{mm}$	穿龈高度3mm 角度17°
CAB.00322	$\varnothing 5.0 \times 10.4\text{mm}$	穿龈高度4mm 角度30°

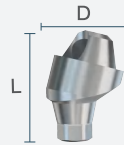

窄径临时基台

编码 规格($\varnothing D \times L$)


CAB.00323	$\varnothing 4.0 \times 3.0 \times 6.6\text{mm}$
CAB.00324	$\varnothing 4.5 \times 3.0 \times 6.6\text{mm}$



标准径临时基台

编码 规格($\varnothing D \times L$)

CAB.00325	$\varnothing 4.5 \times 3.0 \times 5.0\text{mm}$
CAB.00326	$\varnothing 5.5 \times 3.0 \times 5.0\text{mm}$

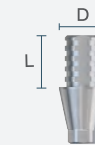

配件

数字化种植体替代体

编码 规格($\varnothing D \times L$)

● 窄径	CCB.00035	$\varnothing 3.8 \times 10\text{mm}$
● 标准径	CCB.00036	$\varnothing 4.3 \times 10\text{mm}$



种植体替代体

编码 规格($\varnothing D \times L$)

● 窄径	CCB.00037	$\varnothing 3.9 \times 11\text{mm}$
● 标准径	CCB.00038	$\varnothing 4.4 \times 11\text{mm}$



开窗印模桩

编码 规格($\varnothing D \times L$)

● 窄径	CCB.00039	$\varnothing 4.0 \times 13.5\text{mm}$
	CCB.00040	$\varnothing 4.5 \times 13.5\text{mm}$
● 标准径	CCB.00041	$\varnothing 4.5 \times 13.5\text{mm}$
	CCB.00042	$\varnothing 5.5 \times 13.5\text{mm}$



施罗得
Schroeder

Schroeder

亲水种植体



施罗得医疗科技有限公司

☎ 河北省石家庄市新华区荣鼎天下A座610室

📞 产品热线：400-966-5888 18600879481（董经理）

对本手册包含的内容，施罗得医疗科技有限公司拥有最终解释权，更多详细资料敬请垂询；本公司工程技术人员将竭诚为您服务。因产品不断创新，请以实物或说明书为准；如有变更，届时恕不另行通知。